


**EXCELLENT ELITE PROCESS
KRINMED INC.
COMPANY**

STERILIZATION TYPE 2 CHEMICAL INDICATOR



EXPOSED

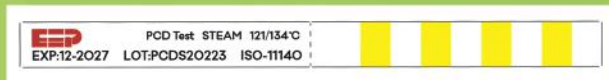

UNEXPOSED

WHAT IS

PCD STEAM CHEMICAL INDICATOR?

The PCD test is used as a daily test for pre-vacuum hospital steam sterilizers. This is a class 2 indicator and is used to sterilize lumen instruments and tubes using a steam autoclave. When performing the cycle with this indicator, you must fold it from the place marked on it and place it inside the PCD indicator holder. Then put the relevant instruments together with the steam PCD chemical indicator in the steam sterilizer. In this test, if all the houses on the indicator change to the final color, the cycle has been completed successfully, and if the color change of even one of the houses is different from the final color, the cycle has encountered an error and the test must be repeated.



Unused indicators should be stored in their original packaging.



Store at room temperature (10-38°C) and 10-70% humidity, away from oxidizing agents, disinfectants, and other liquids.



Keep out of direct sunlight. No special storage required post-sterilization.

اندیکاتور شیمیایی PCD بخار

تست PCD به عنوان یک آزمایش روزانه برای پری وکیوم استریلایزرهای بیمارستانی بخار استفاده می شود. این اندیکاتور کلاس ۲ بوده و برای استریل کردن ابزارهای لومن دار و لوله ها با استفاده از دستگاه اتوکلاو بخار استفاده می شود. به هنگام انجام سیکل با این اندیکاتور باید آن را از جایی که بر روی آن مشخص شده تا کرده، در داخل نگهدارنده مخصوص اندیکاتور PCD قرار دهید. سپس ابزارهای مربوطه را به همراه اندیکاتور شیمیایی PCD بخار در استریلایزر بخار قرار دهید. در این تست اگر تمامی خانه های موجود بر روی اندیکاتور به رنگ نهایی تغییر کند، سیکل با موفقیت انجام شده است و در صورتی که حتی تغییر رنگ یکی از خانه ها با رنگ نهایی متفاوت باشد سیکل با خطا مواجه شده و باید تست دوباره تکرار شود.

ویژگیها:

مبتنی بر آب و غیر سمی
آسان بودن خواندن و تفسیر آن
تغییر رنگ از زرد به مشکی / قهوه ای تیره
سازگار با ISO 11140-1



اندیکاتورهای استفاده نشده را در بسته بندی مخصوص خود نگهداری کنید.



در دمای اتاق (۳۸-۱۰ درجه سانتی گراد) و رطوبت ۷۰٪-۱۰ و دور از عوامل اکسید کننده، ضد عفونی کننده و سایر مایعات نگهداری شود.




دور از نور خورشید نگهداری شود. پس از استریل نگهداری آن شرایط ویژه ای ندارد.



Tel: +982141269999

info@krinmed.com

www.krinmed.com

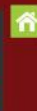

Khosrow 50
South Villa
Tehran - Iran



Made in Iran
by Krinmed Inc
member of AltonTab group

STEAM